




Tu salud cardiovascular desde casa

Una solución accesible, precisa y fácil de usar para que todas las personas que quieran tener más conocimiento sobre su salud cardiovascular puedan hacerlo desde la comodidad del hogar.

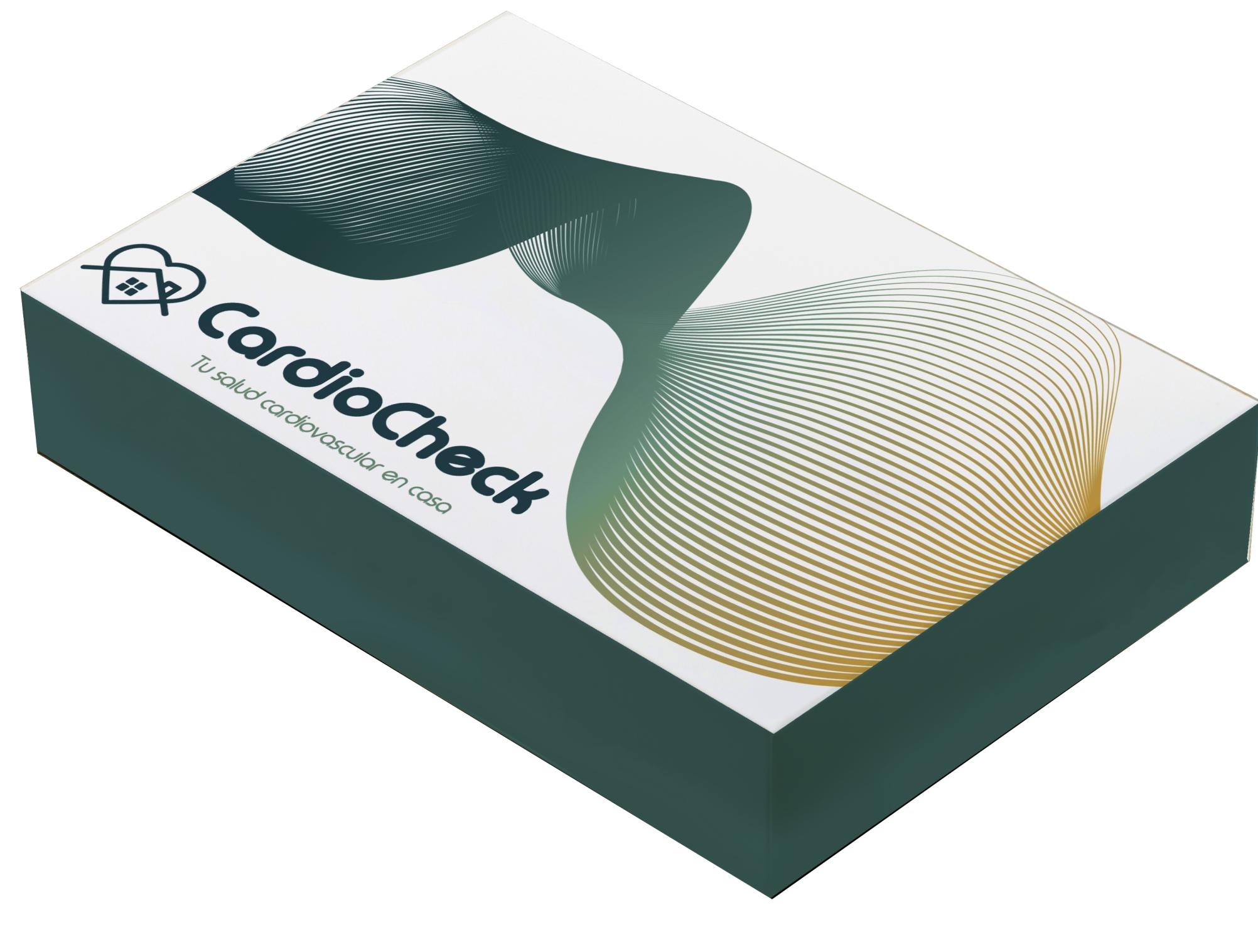

powered by quirónsalud

Paso a paso

1

Compre su kit y rellene el formulario

Compre su kit desde la web y seleccione el tipo de servicio, al realizar la compra tendrá que llenar un formulario para obtener los datos que necesitaremos para poder realizar los análisis. Estos datos son la edad, el sexo, el peso, la altura y algunos hábitos de vida que influyen en los resultados.

2

Active su kit una vez haya sido entregado

Tras comprar el kit tardará entre 1 y 2 días laborables en recibirla en su casa. Cuando vaya a realizar las pruebas, deberá escanear el código QR que incluye para poder activar el kit. Esto nos permite tener constancia de que el kit ha sido recibido y que va a ser utilizado, para que la empresa de transporte vaya a recogerlo.

3

Siga las instrucciones que vienen en el kit

El kit contiene unas instrucciones detalladas que usted deberá seguir para realizar la extracción de sangre correctamente. Si ha elegido el servicio complementario de que le asista un especialista no deberá preocuparse por este paso. Cualquier duda que pueda seguir teniendo, puede acceder a nuestro apartado de Preguntas frecuentes

4

Envío de los kits a los laboratorios

Una vez usted haya realizado todas las instrucciones, podrá indicar en la página web cuando podrá el servicio de recogida pasarse a por el kit para llevarlo a los laboratorios donde se realizará el análisis. De no especificarse día, se le llamará pasados unos días de la activación del kit para poder acordar la fecha de recogida.

5

Reciba sus resultados

Después de que se hayan analizado las muestras se procederá a enviar los resultados a su dirección de correo electrónico. También, si lo ha seleccionado, a su correo ordinario. Además podrá encontrarlos en la web, en el apartado de "Mi perfil" --> "Mis informes" o "Mis pedidos"

También te puede interesar

Descubre que son las enfermedades cardiovasculares y que puedes hacer para prevenirlas

Enfermedades cardiovasculares, qué son, factores de riesgo, síntomas...

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen:

- la cardiopatía coronaria.... [Seguir leyendo](#)

Organización Mundial de la Salud

Cómo prevenir las enfermedades del corazón

Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en los Estados Unidos. También es una causa importante de discapacidad. Existen muchas cosas que pueden aumentar su riesgo de sufrir una enfermedad del corazón. Se les llama factores de riesgo... [Seguir leyendo](#)

MedlinePlus

Los 6 mejores ejercicios para la salud del corazón

Para establecer un plan de ejercicios completo que optimice la salud del corazón, es conveniente centrarse en tres áreas: cardio, fuerza y flexibilidad. Los ejercicios cardiovasculares y de fortalecimiento tienen un impacto directo en la salud del corazón. Por el contrario ... [Seguir leyendo](#)






Instituto Moderno del Corazón y Vascular



¿Como funciona?

Usted recibirá un kit que contendrá lo siguiente:

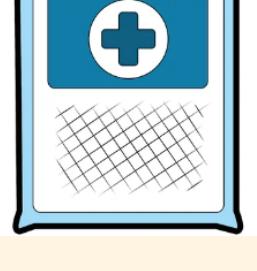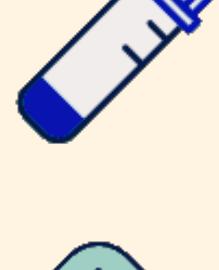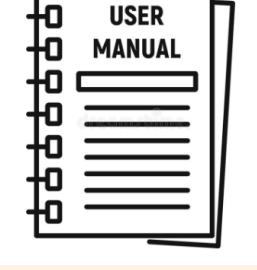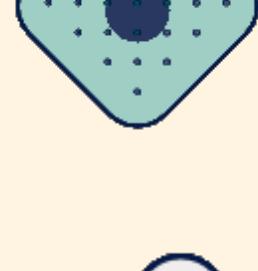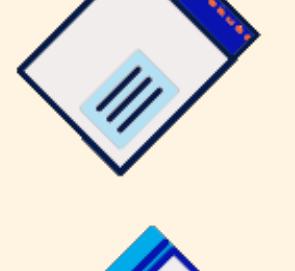

- | | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------------|
|  | 3 Lancetas de extracción |  | Gasas |
|  | 2 Microtubos |  | Manual del usuario |
|  | 3 Toallitas hidroalcohólicas |  | 1 Bolsa de envío |
|  | Apósitos |  | 1 Bolsa de bioseguridad |

Instrucciones de uso

Para comenzar debe asegurarse de que el kit **contiene todo lo indicado** en el apartado anterior, en el caso de que falte algún componente, deberá comunicarse con nosotros en el apartado de CONÓCENOS --> "Contacta con nosotros" y nos encargaremos de enviarle otro kit con todos los componentes.

A continuación meta la mano a pinchar en **agua caliente** durante cinco minutos y utilice una de las **toallitas hidroalcohólicas** para asegurarse de limpiar muy bien el dedo que vaya a pincharse. Para su comodidad es recomendable que utilice la mano que no es predominante y el dedo que mas comodo le resulte.

Posteriormente sitúe uno de los microtubos verticalmente para poder vertir la sangre una vez se haya pinchado. Y para pincharse primero deberá quitar la pestaña de seguridad de la lanceta, colocar el lado con agujero sobre el dedo a pinchar y presionar la lanceta sobre la parte lateral de la yema del dedo.

Tras pincharse deje verter la sangre masajeando el dedo en el microtubo hasta llenarlo, de ser necesario llenar más de un microtubo, repita las instrucciones. Después, presione el pinchazo con una gasa y pongase una tiritia. Ahora deberá tapar el microtubo, meterlo en la bolsa de bioseguridad, y a su vez meterlo en el kit. Tras haber hecho todo esto, solo debe esperar a que vayan a recogerlo.

¿Qué prevenimos?


Las enfermedades cardiovasculares son actualmente la **principal**

causa de muerte a nivel mundial. Cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa, principalmente enfermedad cardíaca isquémica y accidente cerebrovascular.

Se estima que hasta **el 90 % de las enfermedades cardiovasculares podrían llegar a prevenirse**. Una detección a tiempo y un cambio de hábitos en factores de riesgo como la alimentación, la actividad física, el consumo de sustancias perjudiciales, etc. son clave para evitar sus terribles consecuencias.

Ante esta preocupante tendencia, hemos diseñado un servicio integral completo para el análisis de riesgo cardiovascular.

Buscamos ofrecer una solución accesible, precisa y fácil para saber más acerca de su salud cardiovascular desde la comodidad del hogar.

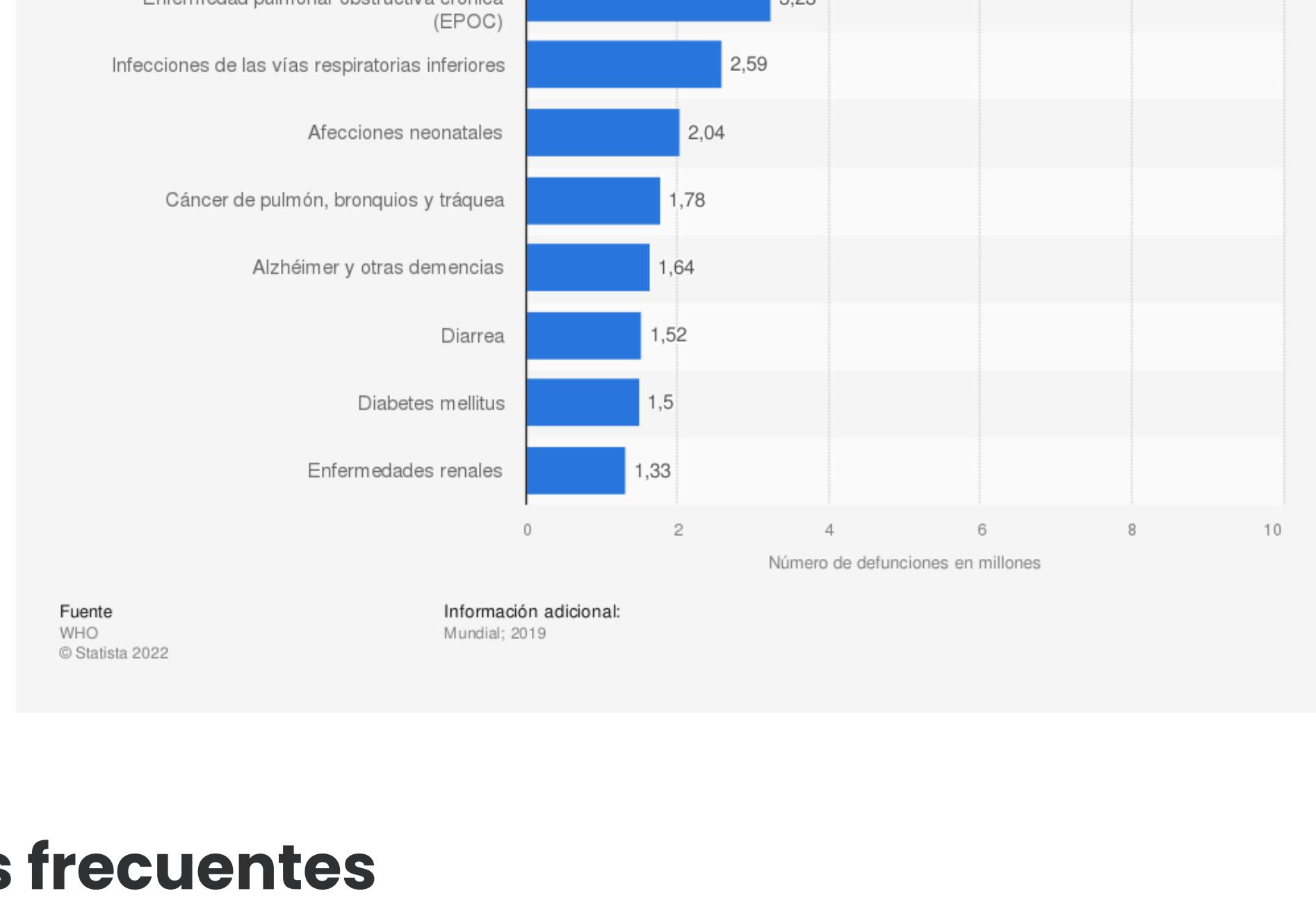

Preguntas frecuentes

¿Cómo debo de tomar la muestra?

El kit incluye instrucciones detalladas acerca de cómo realizar la toma de la muestra, así como acceso a un vídeo paso a paso del proceso.

¿Cómo puedo activar mi KIT?

Una vez llegado el pedido a su domicilio, debe de ir a nuestra web, iniciar sesión e ir al apartado: MIS INFORMES o MIS PEDIDOS.

¿Cuánto tardarán mis resultados?

Los resultados tardan entre 3 y 5 días procesarse y enviarse a su correo electrónico. Si ha elegido entrega de resultados a su correo ordinario podrá tardar entre 1 y 2 días más.

¿Cuánto tiempo tarda en llegar mi kit?

Nuestra empresa de transporte se encargará de entregar su kit para que le llegue entre 1 y 2 días laborables.



Somos CardioCheck



Velamos por tu salud cardiovascular.
Avalados por los expertos y a la vanguardia en
prevención de enfermedades cardiovasculares.



Nuestros valores

Comodidad y conveniencia

Olvídese de las listas de espera, largas colas, tiempo perdido ... Podrá realizar nuestro test sin moverse de casa.

Usabilidad

El kit incluye todos los materiales necesarios para que el usuario pueda realizarse la prueba a sí mismo, acompañado de detalladas instrucciones


Precisión y calidad

Trabajamos con un equipo de especialistas altamente cualificado y con los mejores laboratorios de análisis clínico para ofrecerle el mejor servicio.

Servicio integral

Nosotros nos encargamos de todo y le acompañaremos en todo momento del proceso.

Colaboradores



Certificados de calidad



Contacta con nosotros

Correo electrónico

Escribir ...



Enviar


Dónde nos puedes encontrar

cardiocheck@fundacionquironsalud.es

911 23 45 67

Zurbarán, 28 28010, Madrid, España



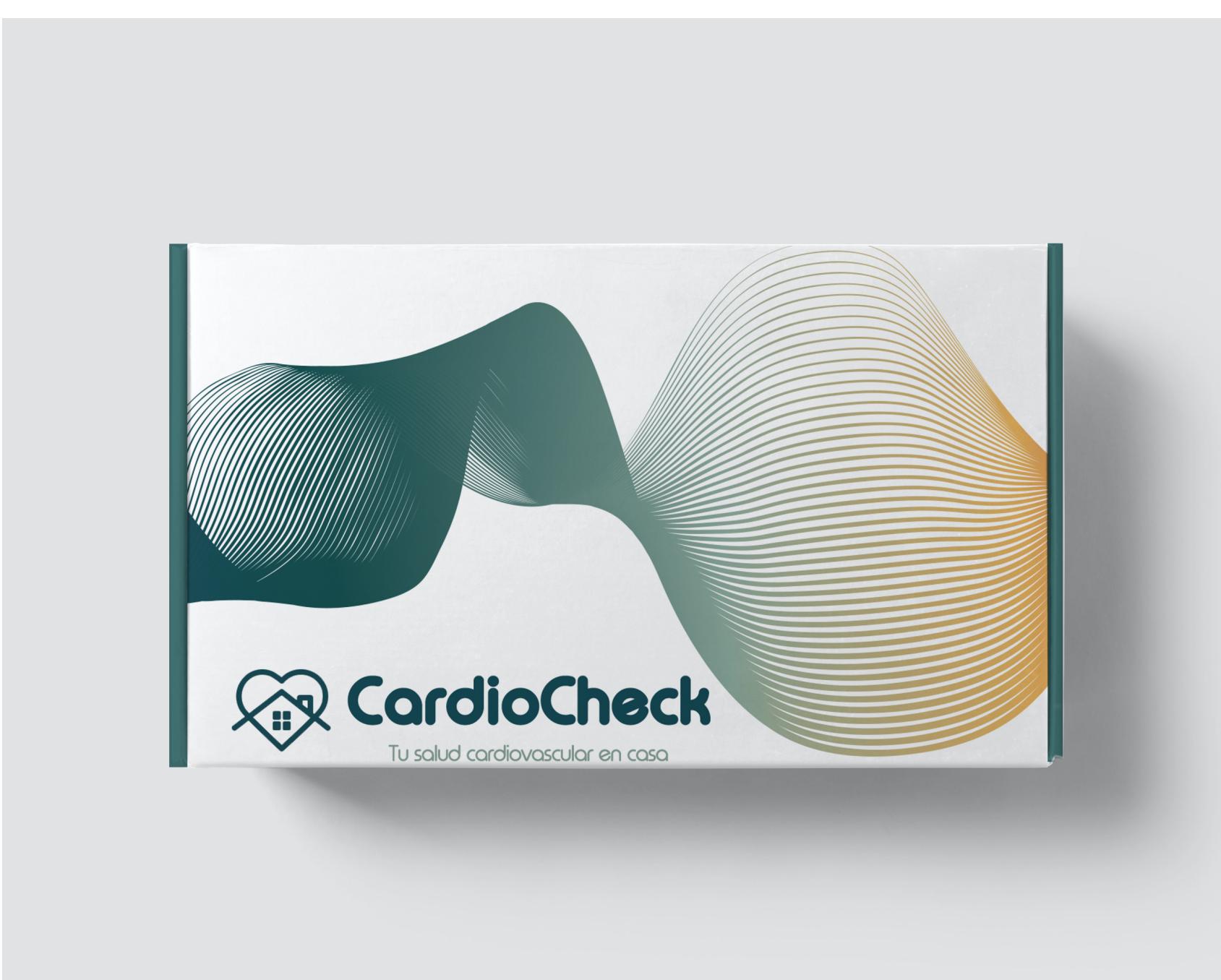

KIT RIESGO CARDIOVASCULAR


Este test permite determinar el riesgo de enfermedad cardiovascular a partir de una sola toma de sangre. El kit contiene todas las herramientas y materiales necesarios para la toma de la muestra y para su envío al laboratorio de análisis. También incluye instrucciones detalladas y fáciles de seguir.

[Comprar](#)

¿QUÉ INCLUYE EL KIT?




3 Lancetas de extracción

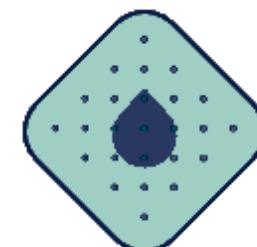

3 Toallitas hidroalcohólicas




Apósitos

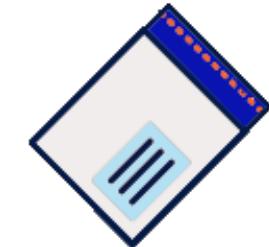

1 Bolsa de envío



2 Microtubos

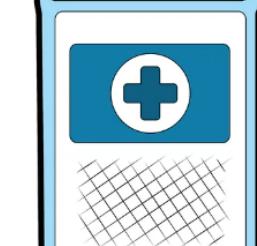

Gasas



Manual del usuario



1 Bolsa de bioseguridad

Reseñas de nuestro test

★★★★★ Fulanita

El proceso ha sido bastante sencillo y cómodo, y los resultados llegan rápido.

★★★★★ Menganita

Me ha parecido un sistema muy bueno. Encantada con la atención recibida y la información tan completa.

CardioCheck

Conócenos
Contacto

quirónsalud
La salud persona a persona

Aviso Legal

Privacidad

Cookies

Términos y Condiciones

Newsletter

Nombre

Apellido

Correo Electrónico



Iniciar sesión

Correo electrónico

Contraseña:



Haga click si no recuerda su contraseña

[INICIAR SESIÓN](#)

Crear cuenta

Nombre

Apellido

Teléfono

Fecha de nacimiento

Correo electrónico

Contraseña:



DNI

[CREAR CUENTA](#)



RECUPERAR CONTRASEÑA

Correo electrónico

Se le enviará un correo electrónico junto a un enlace que le permitirá acceder a su cuenta cambiando su contraseña. Si no lo encuentra en la bandeja de entrada, por favor consulte la carpeta de Spam.

[ENVIAR ENLACE](#)



HOLA, Fulanito

MIS DATOS

MIS INFORMES

MIS PEDIDOS

Resumen de pedidos

Ver todos los pedidos...



MIS DATOS

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

Nombre

Apellidos

DNI

Nombre

Género

Fecha de nacimiento

Dirección

Código postal

Localidad

Teléfono

Actualizar contraseña

Contraseña actual

Nueva contraseña

Repetir contraseña

Método de pago



VISA

[Editar](#)

MASTERCARD

[Editar](#)

AMERICAN EXPRESS

[Editar](#)[MODIFICAR](#)



MIS INFORMES

ACTIVAR EL KIT

Escriba aquí....

Haga click para activar

Resultados:

Descargar los resultados en PDF

PEDIR CITA



MIS PEDIDOS

ACTIVAR EL KIT

Escriba aquí....


Haga click para activar

Seguimiento del envío:

Informe:



Cesta

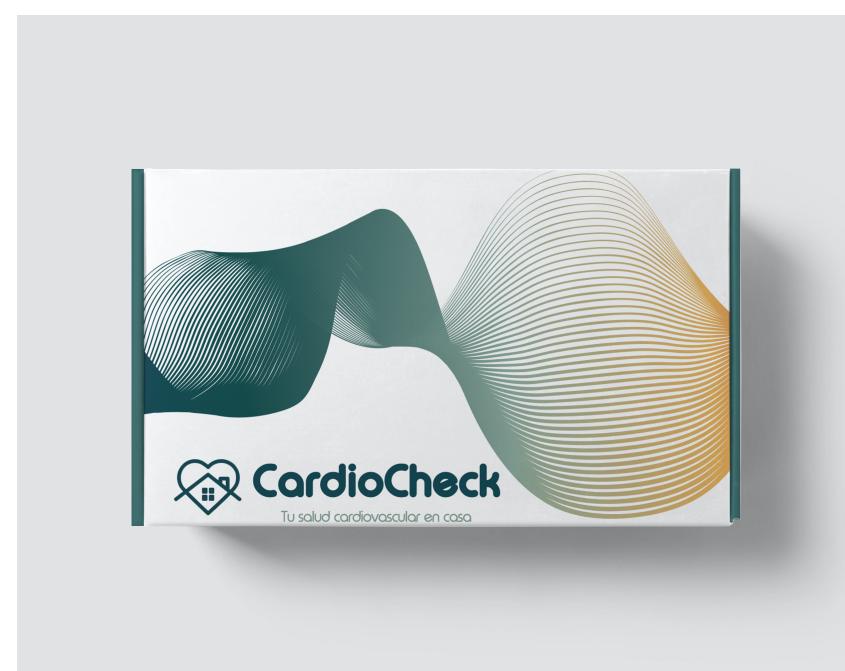

KIT RIESGO CARDIOVASCULAR

Calculo del precio del kit

Envío de los resultados:

Por correo electrónico Por correo postal

Realizar el test:

Enfermera Manera autónoma

PRECIO

Método de compra



VISA



MASTERCARD



AMERICAN EXPRESS

Dirección

Dirección

.....

Código postal

.....

Localidad

.....

Teléfono

.....

COMPRAR